FICHE TECHNIQUE	Pansement israélien	Rédigé par Firstar Traduit par France Sécurité

Date : 07/2024 v.2

Caractéristiques



Référence fournisseur : FS-8020 – Référence distributeur : S524278
Matière : 65% coton et 35% spandex, absence de latex
Compresse : partie externe en non-tissé, partie intérieure en coton
Poids : 80g/m2
Taille du dispositif : 10cmx1m60 non étiré - 10cmx3.6m étiré
Taille de la compresse : 10x18cm
Couleur : Kaki

Description


Stérile, pansement compressif.
Pansement multifonction pouvant servir pour différentes plaies. Il permet de stopper une hémorragie importante en exerçant une pression sur la plaie. Clip de fermeture intégré sans épingles, ni sparadrap ou nœud.
Emballage compact, imperméable et mis sous vide.
Compresse non-adhésive. Jeter après utilisation.

Normes et certification

Dispositif Médical de classe Is conformément à la Directive 93/42 – marquage CE

Instructions d'utilisation

- Sortir le pansement de son emballage et la déplier.
- Placer la compresse sur la plaie
- Insérer le bandage dans l'encoche en forme de V
- Serrer le bandage sur l'encoche
- Fixer le bandage à l'envers
- Envelopper fermement les bords de la compresse grâce au bandage
- Utiliser le crochet de sécurité pour sécuriser le bandage.

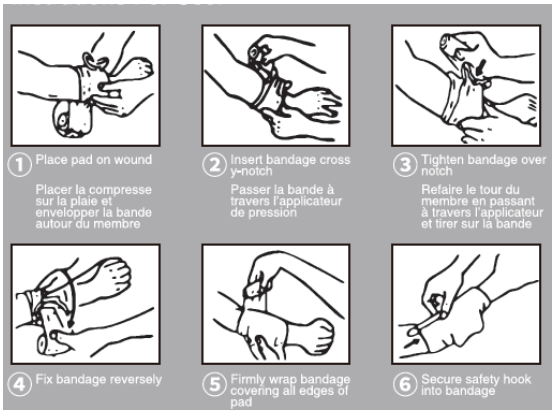

Précautions d'emploi et Contre-indications

- A usage unique, à jeter après utilisation.
- A stocker dans un endroit sec et à température ambiante.
- Destiné à un usage externe.

Date de validité : 5 ans.

Packaging

	Poids (kg)	Taille (cm)	Emballage	Couleur de l'emballage	Type d'impression	Couleur d'impression
Emballage individuel	NA	10cmx3.6m	Sous vide	Kaki	NA	Noir
Carton de 200 PE	12	55x35x45	Carton	Marron	N&B	Noir